



**GESICHERT DURCH  
HAUSNOTRUF  
SERVICE-TELEFON  
0391-7 33 13 30**

Maxim-Gorki-Straße 14 • 39108 Magdeburg

## Installation für das NEO Hausnotruf Leihgerät


### Allgemein:

Das Notrufgerät gibt Ihnen Sicherheit und ein Gefühl der Geborgenheit. NEO ist für den Gebrauch in der eigenen Wohnung, Haus oder Garten, oder auch für Wohnungen im Betreuten Wohnen angedacht.


NEO besteht aus vier Teilen:

1. Der Sender, ein Funkfinger samt Armband den man immer tragen sollte.
2. Der Hauptapparat der an das Telefonnetz angeschlossen wird. (sowie Telefonkabel und AC Netzgerät)

Wenn der Funkfinger durch ein Drücken auf das rote Feld aktiviert wird, so wählt das Hauptgerät eine vorprogrammierte Telefonnummer an die Notrufzentrale. Wenn der Anruf durch die Notrufzentrale beantwortet wird funktioniert das Gerät als Lautsprecher. Sie können dann, wo Sie sich auch in der Wohnung befinden, verständlich machen. Der gleiche Vorgang wird aktiviert wenn Sie auf den roten Knopf am Hauptapparat drücken.

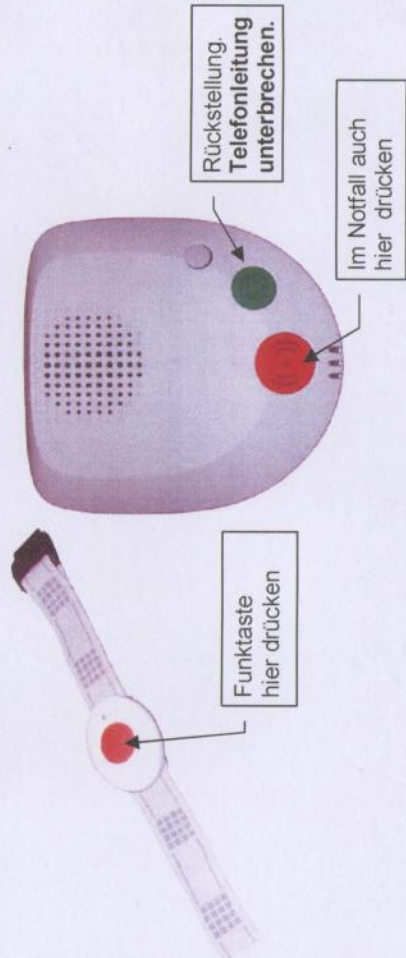


### Verpackungsinhalt

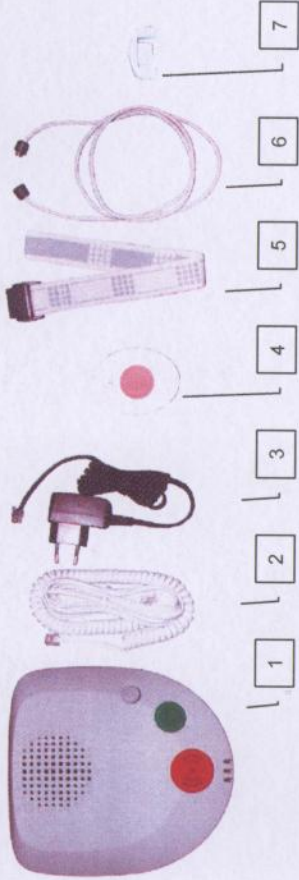

### Installation


Der Funkfinger (4) wird am Arm mit dem Armband (5) angebracht oder kann auch als Halsband mit den Zubehörteilen (6) & (7) getragen werden.

Das beigefügte Telefonanschlusskabel (2) soll mit dem Stecker **A** an der linken Öffnung mit dem **DREIECKS-SYMBOL**, an der an der Wand befindlichen Telefonsteckdose (8) verbunden werden. Das andere Ende **B** soll an der Unterseite des Notruftelefons (1) nur mit dem Anschluss **"LINE"** verbunden werden.

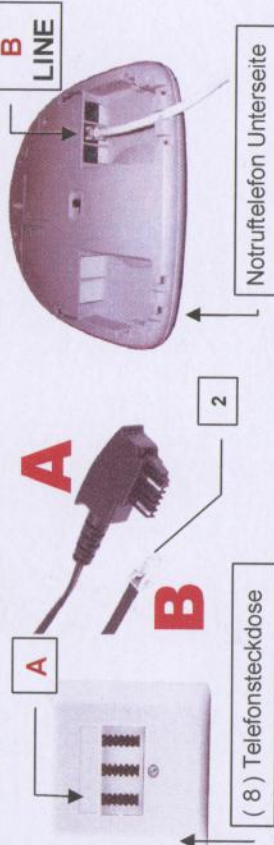

**ACHTUNG!** Kontrollieren Sie, dass das Notrufgerät immer als **1. Gerät links an der Telefonsteckdose (8) angeschlossen ist. ACHTUNG!** Das Basisgerät eines Schnurlos Telefons soll nicht näher als 1 Meter vom Notrufgerät stehen.

Der Netzanschluss (3) darf nur auf der Unterseite des Notrufgerätes (AC) im Anschluss mit der Bezeichnung **"AC"** angeschlossen werden. Den Adapter (3) dann am normalen Netzanschluss (230 V) anschließen.

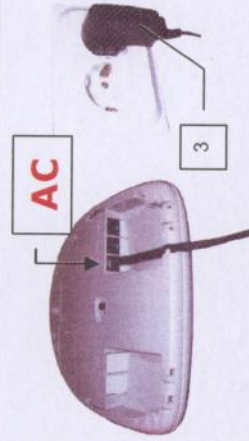

Das Notrufgerät kann auf einen kleinen Tisch gestellt oder an die Wand gehängt werden.

**Das Notruftelefon wird dann eingeschaltet**, indem Sie auf der Unterseite des Notruftelefons den vorhandenen Schiebeschalter in die Position **"I"** führen. (**0** = ausgeschaltet / **I** = eingeschaltet).